

EXAMVISION™



Gratulujeme Vám k Vaším na mieru
vyrobeným lupovým okuliárom.



Obsah

Úvod	3
Kontrola kvality, presná úprava a video	
Galilean HD & Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garancija	10
Dodatna oprema za lupe ExamVision	11
Simboli in navodila za pravilno rabo	14



Úvod

Vybrali ste si vysoko kvalitný presný nástroj, ktorý je prispôsobený Vaším požiadavkám. Ak budete potrebovať Vaše okuliare upraviť, nezabudnite, že sa jedná o zložitý presný nástroj, a preto postupujte dôsledne podľa video návodu alebo požiadajte o pomoc svojho miestneho predajcu ExamVision.

ExamVision môže upraviť pracovnú vzdialenosť na Vašich lupových okuliaroch a vymeniť predpísané šošovky podľa toho, ako sa časom zmení Váš zrak. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte svojho miestneho predajcu ExamVision.

Vaše lupové okuliare boli vyrobené starostlivo a presne podľa Vašich špecifikácií a preto dúfame, že s nimi budete 100% spokojní.




Kontrola kvality, presná úprava a video



Galilean HD & Essential

Skôr ako začnete so svojimi novými lupovými okuliarmi pracovať, pozrite sa prosím na naše videa ExamVision, aby ste sa uistili o správnom nastavení a videní. Na Vašich lupových okuliaroch sme nastavili Vami požadovanú pracovnú vzdialenosť od prednej časti Vášho oka k objektu. Táto vzdialenosť je zapísaná na karte kvality priloženej k Vaším lupovým okuliarom.

Pre optimálne čisté videnie, pohodlie a dokonalé nasadenie sa pozrite na naše video **„Does your loupe fit correctly?”** (Sedia Vám lupové okuliare správne?). Zaistíte tak správnu výšku a uhol lupových okuliarov, ako je znázornené nižšie: višino in kot lupe, kot je prikazano na skici spodaj:

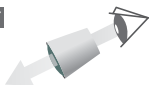

Videa

Videa ExamVision nájdete na našom Youtube kanále a Vimeo. Pre okamžité zhladnutie stačí naskenovať tento QR kód:






Kontrola kvality, presná úprava a video



Kepler Kompakt

Skôr ako začnete so svojimi novými lupovými okuliarmi pracovať, pozrite sa prosím na naše videa ExamVision, aby ste sa uistili o správnom nastavení a videní. Na Vašich lupových okuliaroch sme nastavili Vami požadovanú pracovnú vzdialenosť od prednej časti Vášho oka k objektu. Táto vzdialenosť je zapísaná na karte kvality priloženej k Vaším lupovým okuliarom.

Musíte svoje okuliare Kepler Kompakt detailne doostríť pre každé oko zvlášť na Vašu pracovnú vzdialenosť. Optimálne doostrenie zaistíte pomocou dodaného Allenovho kľúča. Pre optimálne čisté videnie, pohodlie a dokonalé nasadenie sa pozrite na naše video „*Fitting your Kepler Kompakt loupe*“ (Prispôsobenie Vašich lupových okuliarov Kepler Kompakt). Zaistíte tak správnu výšku a uhol lupových okuliarov, ako je znázornené nižšie:

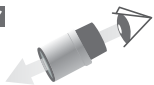

Videa

Videa ExamVision nájdete na našom Youtube kanále a Vimeo. Pre okamžité zhladnutie stačí naskenovať tento QR kód:





Kontrola kvality, presná úprava a video



Kepler Advanced

Skôr ako začnete so svojimi novými lupovými okuliarmi pracovať, pozrite sa prosím na naše videa ExamVision, aby ste sa uistili o správnom nastavení a videní. Na Vašich lupových okuliarioch sme nastavili Vami požadovanú pracovnú vzdialenosť od prednej časti Vášho oka k objektu. Táto vzdialenosť je zapísaná na karte kvality priloženej k Vaším lupovým okuliarom.

Musíte Vaše okuliare Kepler Advanced detailne doostriť pre každé oko zvlášť na Vašu pracovnú vzdialenosť. Pre optimálne čisté videnie, pohodlie a dokonalé nasadenie sa pozrite na naše video „*Fitting your Kepler Advanced loupe*“ (Prispôbenie Vašich lupových okuliarov). Zaisťíte tak správnu výšku a uhol lupových okuliarov tak ako je znázornené nižšie:



Video

Videa ExamVision nájdete na našom Youtube kanále a Vimeo. Pre okamžité zhladnutie stačí naskenovať tento QR kód:



Záruka

5 ročná záruka výrobcu

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Upozorňujeme, že naša záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym používaním, nedbalosťou, náhodným poškodením, úpravami, prepravou v neoriginálnom obale alebo na chyby spôsobené nesprávnym nastavením, údržbou, servisom alebo čistením.

V prípade narušenej funkčnosti vráťte výrobok k oprave Vášmu predajcovi ExamVision.

Navštívte taktiež: examvision.com/warranty



Príslušenstvo k lupovým okuliarom ExamVision



Nosníky

Priehľadné silikónové nosníky v rôznych veľkostiach.



Šnúrka na krk

Jemná, ale odolná šnúrka pre extra bezpečnosť pri nosení lupových okuliarov - so silikónovými nástavcami.



Svorka na kábel a adaptéry pre štít VisionShield

Svorky na kábel nasadíte na bočnice Vašich lupových okuliarov a jemne do nich vtlačíte kábel LED osvetlenia. Teraz môžete k lupovým okuliarom pripevniť štít VisionShield.



Čistiaci roztok (bez alkoholu)

Náš špeciálny čistiaci roztok udrží Vaše lupové okuliare v perfektnom stave. Použite malé množstvo na handričku z mikro vlákna a bezpečne odstráňte nečistoty, prach a masť zo šošoviek.

Príslušenstvo k lupovým okuliárom ExamVision



Dezinfekčné utierky (bez alkoholu)

Naše dezinfekčné utierky udržia Vaše lupové okuliare v perfektnom stave. Tieto jednorazové čistiace utierky sú rýchlou a jednoduchou metódou, ako bezpečne odstrániť nečistoty, prach a masť.



Visionshield (štíty vo veľkosti L, XL a MAX)

Chránia lupové okuliare a Vašu tvár pred postriekaním a špinou. Na lupové okuliare sa ľahko nasadia vďaka adaptéru Velcro. Veľkosť L je vhodná pre lupové okuliare Galilean HD a Essential a veľkosť XL pre lupové okuliare Kepler. Tieto verzie majú výrez pre čelovú lampu.

VisionShield MAX je štít cez celú tvár, ktorý sa tiež veľmi ľahko nasadí a je vhodný pre ktorékoľvek lupové okuliare ExamVision ako súčasť Vašej každodennej rutiny.

Štíty Visionshield ExamVision sú vyrobené z nepraskajúcej, pružnej plastovej fólie, ktorá sa veľmi ľahko čistí, dezinfikuje a znova použije.



Sideshields (bočné kryty)

Takmer neviditeľné, ľahké postranné kryty chránia oči pred postriekaním a nečistotami. Jednorazové, v balení po troch pároch.



Šperky

Pokiaľ by Vám nestačilo celkové prispôsobenie, čo tak pridať diamant? Váš krásny rám ICON môže zvýrazniť 0,02 karátový (1,7mm) diamant zasadený do strieborného cvoku, ktorý ručne vyrába dánsky návrhár šperkov. K dispozícii sú tiež rubíny a zafíry. My to všetko zdokonalíme. Vy si to prispôsobíte.



Farebné koncovky straníc

Antialergické koncovky straníc pre personalizáciu a pohodlné nosenie. Vyrobené z umelej gummy. Dostupné v širokej farebnej škále.

Kompletný zoznam dostupného príslušenstva si môžete prehliadnúť na:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Symboly a pokyny pre správne použitie



Výrobca

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danska
www.examvision.com



eRFU Indicator

Prečítajte si návod na použitie

Digitálny návod v rôznych jazykových verziách
nájdete na odkaze: examvision.com/support



Upozornenie. Správne použitie a údržba.

Vaše lupové okuliare ExamVision sú presným prístrojom. Tak ako u každého kvalitného výrobku, je potrebná správna starostlivosť aj o lupové okuliare, aby ste ich udržali v prvotriednom stave. Pri bežnom každodennom používaní budú Vaše lupové okuliare potrebovať čas od času servisnú kontrolu. Pravidelne ich kontrolujte aj vy sami. Ak si všimnete opotrebenie alebo poškodenie, prípadne sa Vám budú zdať lupové okuliare voľné alebo nebudú sedieť tak dobre ako keď boli nové, prestaňte ich používať a ihneď požiadajte o servis a náhradné diely u svojho predajcu ExamVision. S drobnými úpravami alebo utiahnutím skrutiek Vám môže pomôcť aj Váš miestny optik. NIKDY lupové okuliare nijak neupravujte.

Alergie

ExamVision používa u okuliarov len vysoko kvalitné, na alergie testované materiály. Vaše lupové okuliare musia byť prispôsobené tak, aby sa dotýkali kože len nosnicami a koncovkami straníc. Vo veľmi málo pravdepodobných prípadoch podráždenia sa obráťte na svojho predajcu ExamVision.

Starostlivosť a čistenie

NEPOUŽÍVAJTE k čisteniu alkohol. Používajte len doporučené čistiace a dezinfekčné bezalkoholové prostriedky ExamVision a jemnú utierku bez vlákna. NESTERILIZUJTE v autoklávu alebo ultrazvukových čističkách. NEPOUŽÍVAJTE UV imerzné dezinfekčné metódy.



Uchovávajte mimo dosah slnečného žiarenia

Nenechávajte lupové okuliare priamo na slnku. Zväčšenie môže vytvoriť „horúci bod“ ktorý môže spôsobiť požiar.



Udržujte v suchu



Krehké, manipulujte opatrne



Nepoužívajte ak je obal poškodený



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com